

SERVOCURA® Tragegurt für Urin-Beinbeutel



EN **leg bag straps**

DE	Farbe Weiß	Material Thermoplastische Elastomer, Silikon	Länge 54 cm für einen Beinumfang von 50 cm	Zweckbestimmung Zur Befestigung von Urin-Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel
----	----------------------	--	--	--

EN	Colour white	Material thermoplastic rubber, silicone	Length 54 cm for a legcircumference of 50 cm	Intended purpose For attaching urine leg bags to the upper or lower leg
----	------------------------	---	--	---

REF 25226



PZN 09095918

LOT XXXXXXXXX



YYYY-MM-DD



YYYY-MM-DD






(xx)xxxxxxxxxxxxxxxx
(xx)xxxxxx
(xx)xxxxxx



Orbisana Healthcare GmbH
Biberweg 24-26
53842 Troisdorf | Germany
Tel. +49 (0)2241 9322-0
info@orbisana.de
www.orbisana.de



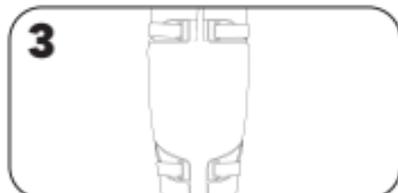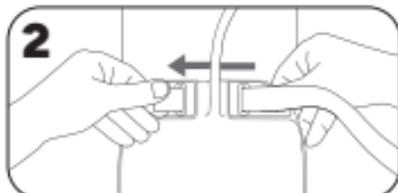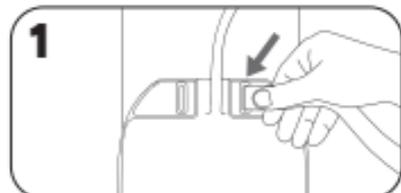

DE Beschreibung:

Mit SERVOCURA® Tragegurten können Urin-Beinbeutel mit Halteösen am Ober- oder Unterschenkel befestigt werden. Die Gurte werden mit einem Klettverschluss geschlossen, die gummierte Rückseite sorgt für Halt auf der Haut.

Warnung: Die Gurte nicht zu fest am Bein anziehen. Thrombosegefahr!

Anwendung:

1: Den Tragegurt mit der gummierten Seite zum Bein von der Vorderseite durch die rechte obere vorgestanzte Halteöse des Urinbeutels stecken.

2: Das Gurtende durch die linke obere Halteöse am Urinbeutel herausziehen, beide Gurtenden um das Bein herumführen und mit dem Klettverschluss schließen.

3: Den zweiten Gurt entsprechend durch die beiden unteren vorgestanzten Halteösen des Urinbeutels ziehen und den Gurt schließen.



Hinweis: Zum Waschen Klettverschlüsse schließen. Vor Gebrauch vollständig trocknen lassen. Tragegurte über den Restmüll entsorgen, wenn sie beschädigt oder verfärbt sind, spätestens jedoch nach 14 Tagen.

Description:

With SERVOCURA® leg bag straps, urine leg bags with eyelets can be attached to the upper or lower leg. The straps are fixed with a Velcro fastener, the rubberized backside provides support on the skin.



EN

Warning: Do not tighten the straps too tight on the leg. Risk of thrombosis!

Instructions for use:

- 1:** Insert the strap with the rubberized backside to the leg from the front through the upper right pre-cut eyelet of the urine bag.
- 2:** Pull the strap end out through the upper left pre-cut eyelet, pass both strap ends around the leg and close with the Velcro fastener.
- 3:** Pull the second strap according to the first strap through the two lower pre-cut eyelets of the urine bag and close the strap.



Note: Close the Velcro fasteners for washing. Let dry completely before use. Dispose of the straps in domestic waste, if they are damaged or discolored, at the latest after 14 days.

Verwendete Symbole / Symbols used

				
DE	CE-Kennzeichen	Bestellnummer	Chargenbezeichnung	Medizinprodukt
EN	CE mark	Order number	Batch number	Medical device
				
DE	Hersteller	Herstelldatum	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	
EN	Manufacturer	Date of manufacture	Do not use if the packaging is damaged	
				
DE	Wiederverwendung an einem einzelnen Patienten	Vor Sonnenlicht schützen	Trocken aufbewahren	Verwendbar bis
EN	Single patient multiple use	Keep away from sunlight	Keep dry	Use by
		PZN		
DE	Gebrauchsanweisung beachten	Pharmazentralnummer	Internetseite mit Patienteninformation	Inhalt
EN	Consult the instructions for use	Central pharmaceutical number	Patient Information Website	Content
				
DE	Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts	Nicht im Trockner trocknen	Schonwaschgang bis 60°	Der Grüne Punkt
EN	Unique device identifier	Do not tumble dry	Gentle wash cycle up to 60°	The Green Dot