

HOFFRICHTER TREND III

Technische Daten

Merkmale	
Abmaße (BxTxH)	189x168x96 mm
TREND III	278x183x102 mm
TREND III mit Anfeuchter	
Gewicht	ca. 1 kg
Gewicht Anfeuchter	ca. 700 g
Schalldruckpegel	<27 dB(A)*
Betriebsspannung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

*ohne AquaTrend

Therapieparameter

Parameter	Einstellbereich	Einstellschritte
CPAP	4 – 20 hPa	0,5 hPa
IPAP	7 – 25 hPa	0,5 hPa
EPAP	4 – 20 hPa	0,5 hPa
Mindestvolumen** mit optionaler Druckzugabe	aus; 0,2 – 1,5 l	0,01 l
Start-Stopp-Automatik	aus, 1 – 60 min	1 min
Softstartzeit	aus; start; start/stop	–
Maskentest	aus, 5 – 90 s	5 s

** nur TREND III AutoBILEVEL ST

Je nach Gerätetyp verfügt TREND III über die folgenden Therapiemodi

Gerätetyp	Modi					
	CPAP	APAP	S	T	ST	A-S
HOFFRICHTER TREND III CPAP	•					
HOFFRICHTER TREND III AutoCPAP	•	•				
HOFFRICHTER TREND III BILEVEL S	•		•			
HOFFRICHTER TREND III BILEVEL ST	•		•	•	•	
HOFFRICHTER TREND III AutoBILEVEL S	•	•	•			•
HOFFRICHTER TREND III AutoBILEVEL ST	•	•	•	•	•	•

Lieferumfang

HOFFRICHTER TREND III, Therapieschlauch, Schaltnetzteil, Netzkabel, Ersatzfilter, Transporttasche

Bestellinformationen

Beschreibung	VE	Hilfsmittelnr.	Artikel-Nr.
HOFFRICHTER TREND III CPAP	1	14.24.20.0076	00015152
HOFFRICHTER TREND III CPAP mit Anfeuchter	1	14.24.20.1042	00015152 + 00015037
HOFFRICHTER TREND III AutoCPAP	1	14.24.21.0058	00015150
HOFFRICHTER TREND III AutoCPAP mit Anfeuchter	1	14.24.21.1029	00015150 + 00015037
HOFFRICHTER TREND III BILEVEL S	1	14.24.22.0030	00015153
HOFFRICHTER TREND III BILEVEL S mit Anfeuchter		14.24.22.1022	00015153 + 00015037
HOFFRICHTER TREND III BILEVEL ST	1	14.24.24.0032	00015151
HOFFRICHTER TREND III BILEVEL ST mit Anfeuchter		14.24.24.1014	00015151 + 00015037
HOFFRICHTER TREND III AutoBILEVEL S	1	14.24.23.0013	00015158
HOFFRICHTER TREND III AutoBILEVEL S mit Anfeuchter		14.24.23.1008	00015158 + 00015037
HOFFRICHTER TREND III AutoBILEVEL ST	1	14.24.25.0016	00015154
HOFFRICHTER TREND III AutoBILEVEL ST mit Anfeuchter		14.24.25.1009	00015154 + 00015037
HOFFRICHTER Anfeuchter AquaTrend III-NG	1	14.24.17.2***	00015037
Heatable Comfort Tube System	1	14.99.99.0010	00003479
HOFFRICHTER Atemtherapieschlauch (Mehrweg) 22 mm ID	1	14.99.99.0010	00007875
HOFFRICHTER TREND III Filterkassette mit Filtermaterial	1	14.99.99.1036	00015061
Bakterienfilter	1	14.99.99.0004	****
Philips O ₂ Sicherheitsventil	1	–	00004947
Adapter zur O ₂ -Einleitung	1	14.99.99.0003	00004943
HOFFRICHTER TREND III Bluetooth Adapter	1	–	31200011

*** Hilfsmittelnummer beantragt

**** Artikelnummer auf Anfrage

HOFFRICHTER
RESPIRATORY CARE

HOFFRICHTER GmbH
Mettenheimer Str. 12/14 | 19061 Schwerin | Germany
Tel. +49 (0)385 39925-0 | info@hoffrichter.de | www.hoffrichter.de




00038235_PL_TREND III_DEU_2023-08-07_1.0

HOFFRICHTER
RESPIRATORY CARE

TREND III

Individuelle Bedürfnisse im TREND

HOFFRICHTER Produktportfolio

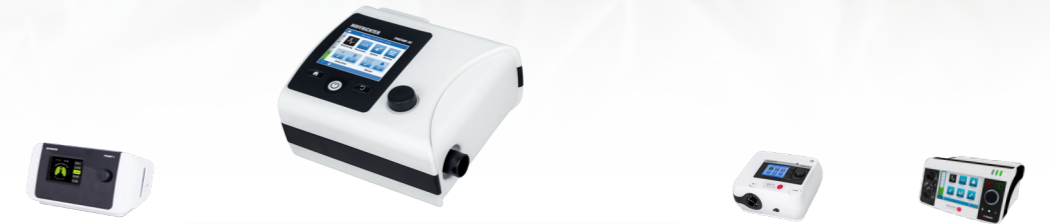

Parameter	POINT 3 CPAP	POINT 3 AutoCPAP	TREND III BILEVEL S	TREND III BILEVEL ST	TREND III AutoBILEVEL S	TREND III AutoBILEVEL ST	LAVI 30 LAVI 35				LAVI 40 LAVI 45	CARAT I pro	CARAT II pro	
	Schlaftherapie							Beatmung						
CPAP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
APAP		•			•	•								
S			•											
T				•										
ST					•									
A-S						•								
PCV							•	•	•	•	•	•	•	•
APCV							•	•	•	•	•	•	•	•
PSV							•	•	•	•	•	•	•	•
PSV-S							•	•	•	•	•	•	•	•
P-SIMV														
HFT								•	•					
VCV													•	•
AVCV													•	•
V-SIMV													•	•
Mindestvolumen						•								
P max	20	20	25	25	25	25	30	35	40	45	50	50		
Komfortparameter	•	•	•	•	•	•								
Externer Atemluftbefeuchter			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Integrierter Atemluftbefeuchter	•	•	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³
Vented Mask (NIV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Non-vented Mask (NIV) ⁴			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Invasive Ventilation (IV)													•	•
Tagesberichte (APP)			• ¹	• ¹	• ¹	• ¹								
Softwareschnittstelle (über USB)			• ²	• ²	• ²	• ²								
Interne Batterie							• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³
Externe Batterie			• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³
Indikation	OSA	OSA	OSA OHS	OSA OHS	OSA OHS	OSA OHS	<16 h/d Ventilation	<16 h/d Ventilation	<16 h/d Ventilation	>16 h/d Ventilation				

¹Nur Android, via BT ²Direkt USB / lokales Netzwerk (TRENDnet) ³Optional ⁴+ passives Ausatemventil

HOFFRICHTER *TREND III*

Individuelle Bedürfnisse im *TREND*

HOFFRICHTER *TREND III* bietet folgende Modi:

- HOFFRICHTER *TREND III* BILEVEL S
Therapiekomfort – Der Patient behält jederzeit die Kontrolle
- HOFFRICHTER *TREND III* BILEVEL ST
Der Komfort des BILEVEL S, kombiniert mit der Sicherheit des BILEVEL T
- HOFFRICHTER *TREND III* AutoBILEVEL S
Das sich anpassende BILEVEL S
- HOFFRICHTER *TREND III* AutoBILEVEL ST
Die Erfüllung aller Patientenbedürfnisse in der Schlaftherapie

NEU: Mit der HOFFRICHTER *TRENDapp* können über eine Verbindung zu einem Mobilgerät via Bluetooth, wichtige Daten ausgelesen, in ein PDF-Dokument umgewandelt und versandt werden.



Made in Germany



Die HOFFRICHTER *TREND III* Serie wurde – wie alle Geräte aus dem Hause HOFFRICHTER – in Deutschland von hochqualifizierten Ingenieuren unter Berücksichtigung der neuesten Forschungs- und Entwicklungsstandards entwickelt. Die Montage des Atemtherapiegerätes erfolgt unter Beachtung strengster Qualitätsstandards – ebenfalls am Standort Deutschland.

Flüsterleise Therapie



Mit nur ca. 27 dB(A) bietet die HOFFRICHTER *TREND III* Serie die bewährte HOFFRICHTER Silence Technology (HST) in einem neuen modernen Design an. Die HOFFRICHTER Silence Technology (HST) steht für einen flüsterleisen Betrieb der Hochleistungsturbine – auch bei hohem Therapiedruck.

Leicht und kompakt



Mit etwa 1 kg Gewicht (ca. 1,7 kg mit Befeuchter) ist die HOFFRICHTER *TREND III* Serie ein wahres Leichtgewicht. Das modern abgerundete Design gepaart mit kompakten Abmessungen machen die Geräte zu einem optischen Highlight. Mit seinen Abmessungen (LxBxH 189x168x96 mm) ist es ein idealer Begleiter auch auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen.

Intuitives Bedienkonzept



Die Geräte der HOFFRICHTER *TREND III* Serie sind mit dem bewährte HOFFRICHTER Bedienkonzept und einem erweiterten Patientenmenü mit großem LED Farbdisplay ausgestattet.

Optimiertes Datenmanagement



Der Anwender hat bei allen Geräten der HOFFRICHTER *TREND III* Serie jederzeit Zugriff auf die erweiterten Übersichten seiner Therapie- und Effizienzdaten. Für eine detaillierte Auswertung der Therapie- und Compiancedaten der letzten 365 Tage steht die HOFFRICHTER Analysesoftware easySET via USB bzw. über die TRENDnet per PSG LAN Schnittstelle zur Verfügung. Bei Verwendung der HOFFRICHTER *TRENDapp* ist über eine Verbindung mit einem Mobilgerät via Bluetooth, das Auslesen wichtiger Daten und das Versenden als PDF möglich.

Individueller Anwenderkomfort



Über die verfügbaren Versionen der HOFFRICHTER *TREND III* Serie wird eine individuelle und anwenderbezogene Schlaftherapie ermöglicht, dabei sorgt der bewährte HOFFRICHTER FLEXTIME Modus für eine besonders schonende und angenehme Therapie. Für die automatische Anpassung der notwendigen Therapiedrücke an die Bedürfnisse des Anwenders stehen die Versionen AutoBILEVEL S oder AutoBILEVEL ST zur Verfügung.